


COLCHÓN DE AIRE MOTORIZADO AUTOMÁTICO

axtair automorpho® plus

• Usuarios con riesgo de UPP medio a elevado • Ayuda al tratamiento de UPP de estadio 1 a 4

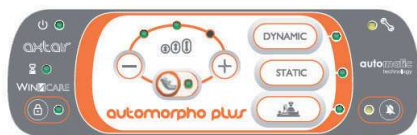

COLCHÓN


- 18 celdas de poliuretano éter independientes y extraíbles de 12cm de altura de aire terapéutico.
 - Zona cabeza: 2 celdas de cabeza estáticas recubiertas por una almohada.
 - Zona pies: 4 celdas para la descarga en la zona de los talones.
- Soporte de espuma de poliéter de +5cm de espesor situado en un compartimento independiente.
- Apertura y cierre de la válvula CPR rápido y cómodo con una sola mano
- Tapón de transporte para autonomía de 8 horas
- 4 celdas descarga de talón
- Guía para cables (opcional)

COMPRESOR

- Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado, en función de la morfología del paciente.
- 3 modos terapéuticos: dinámico, estático a baja presión y asistencia o cuidados.
- Gestión de la posición sentado (>30°)
- Ajuste confort en todos los modos y posiciones del paciente: Regulación del nivel de presión.
- Alarmas visuales y sonoras.
- Número de serie en la parte posterior del compresor: manual de instrucciones simplificado y código QR en los laterales.

FUNDAS DISPONIBLES

- Lado superior: bielástica, impermeable a los líquidos y transpirable al vapor de agua.
- Lado inferior: base antideslizante
- 2 fundas disponibles:
 - PROMUST PU HD (funda negra)
 - PROMUST CIC (funda azul) con tratamiento antibacteriano con iones de plata (antifúngido, antiácaros, antibacteriano y antiolor).

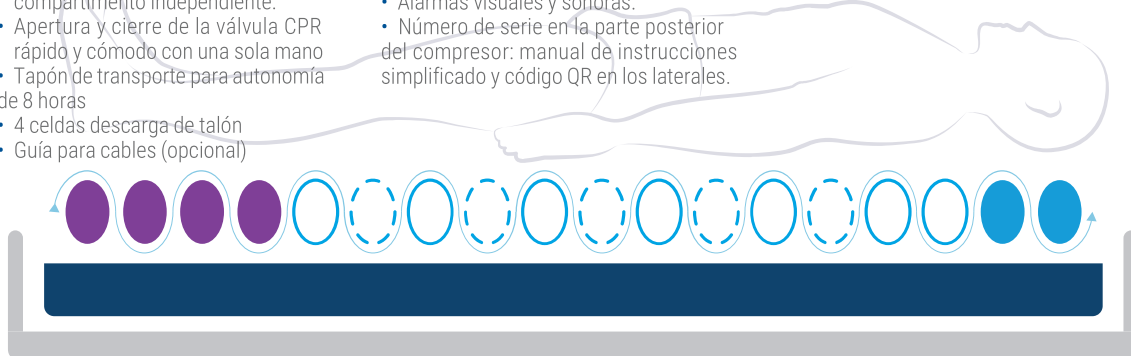

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES/ PESO	PESO PACIENTE	NORMATIVA DE FUEGO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 90 cm	VAXT4/ AUTO-P	195 x 87 x 17 cm	30 to 165 Kg	EN 597-1 and 2 GPEM D1 90 Clase D	<p>Colchón</p> <p>Válvula CPR de urgencia 18 celdas de poliuretano con base éter (300 µ) independientes y extraíbles de 12 cm de altura de aire terapéutico. 2 celdas de cabeza estáticas recubiertas de una almohada confort 4 descargas de talón de serie.</p> <p>Soporte de espuma poliéter extraíble de +5 cm de grosor, situado en un compartimento independiente (densidad 18kg/m³, sustentación 3.5 kPa)</p> <p>Compresor</p> <p>Medidas: 22 x 25 x 11.5 cm</p> <p>Peso: 2.7 kg</p> <p>Modo dinámico (alternante): 1 de cada 2 celdas.</p> <p>Tiempo de ciclo completo: de 9 a 14 minutos.</p> <p>Sistema patentado de cálculo automático y continuo de la presión de inflado.</p> <p>Ajuste confort personalizado</p> <p>Alarmas visuales y sonoras</p> <p>Flujo > 7 l / min</p> <p>Alimentación eléctrica: 220-240 V - 50 Hz</p> <p>Class II tipo BF</p> <p>Consumo medio: 5 Wh</p> <p>Decibelio del compresor:</p> <p>Nivel acústico según NF EN3744: <35 dBA</p> <p>Conformidad eléctrica y electromagnética según las normas IEC 60601-1 Ed.3; IEC 60601-1-2</p>
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust CIC Para camas de 90 cm	VAXT4/ CIC-P	8kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 100 cm	VAXT4/ AUTO100-P	195 x 97 x 17 cm			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust CIC Para camas de 100 cm	VAXT4/ CIC100-P	10kg			
AXTAIR AUTOMORPHO® PLUS (Compresor + colchón) Funda integral de Promust PU HD Para camas de 120 cm	VAXT4/ AUTO120-P	195 x 117 x 17 cm 12kg			

Mantenimiento Promust PU HD

2 años de garantía.



Material antideslizante en la parte inferior



Bolsa de transporte con identificación en la parte delantera



Válvula CPR (Cardio Pulmonary Rescue)



OPCIÓN: Bomba de inflado rápido

WIN CARE