

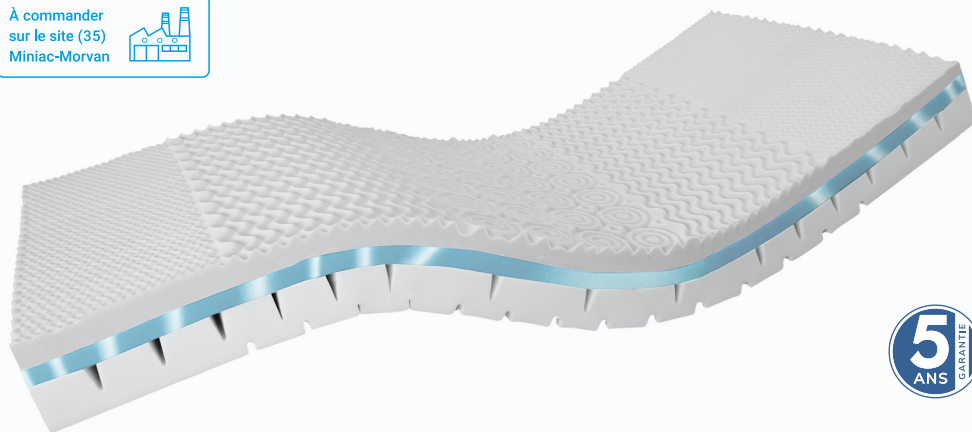
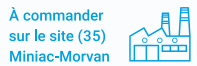


À commander  
sur le site (35)  
Miniac-Morvan

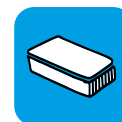

Score sur l'Échelle de Braden

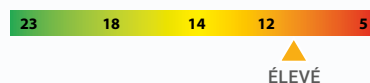

## CARSOFT 4

### INDICATION THÉRAPEUTIQUE

Support de lit d'aide à la prévention de l'escarre chez les patients à **RISQUE ÉLEVÉ À TRÈS ÉLEVÉ** de survenue d'escarre (selon jugement clinique et échelles), levé dans la journée, alité plus de 15 heures.

Aide au traitement d'escarre(s) de **stade 1 à 2** hors zone d'appui ou avec possibilité d'exclusion d'appui avec système de décharge localisée ou de positionnement.

30 ≤ 120kg



NORMES NON FEU  
EN 597 part 1 & 2

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ▶ Matelas monobloc constitué de 3 couches de mousse polyuréthane de haute qualité
- ▶ Partie supérieure en mousse VE : 50 kg/m<sup>3</sup> avec découpes innovantes, favorise l'immersion du patient et réduit les points de pression.
- ▶ Partie intermédiaire en mousse HE : 40 kg/m<sup>3</sup> apporte un maintien ferme et une bonne durée de vie de la mousse viscoélastique.
- ▶ Base mousse HR 37 kg/m<sup>3</sup> avec découpes inférieures permet de suivre au mieux la cinématique des lits médicalisés.
- ▶ Poids matelas : ~ 11,3 kg
- ▶ Dimension matelas : 195 x 88 x 16 cm
- ▶ Dimension couchage : 200 x 90 cm
- ▶ Disponible en house CARTEX
- ▶ Disponible en conditionnement unitaire uniquement

## LES + PRODUIT

- Assure une prévention d'escarre pour des patients à risque élevé avec un confort maximum
- Présence de découpes multi portance sur la partie supérieure afin de limiter les points de pression
- Apporte une bonne circulation de l'air et limite ainsi le phénomène de macération

HOUSSE	DIMENSIONS	CARTON INDIVIDUEL	HOUSSE DE RECHANGE
	200 x 90 x 16 cm	652506	639212