


# CAMA **DUO DIVISYS**

ESTE PRODUTO CUMPRE OS REQUISITOS DISPOSTOS PELA DIRETIVA EUROPEIA 93/42/CEE. FOI CONCEBIDO E FABRICADO CONFORME A NORMA VIGENTE CE 60601-2-52

- **Cama DUO DIVISYS** de casal (até 270 kg), com dois sommiers independentes de 140 cm (2x70 cm) e 160 cm. (2x80 cm)
- **Conforto e higiene:** sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.
- **Ergonomia:** grande amplitude de elevação de 34 a 74 cm.

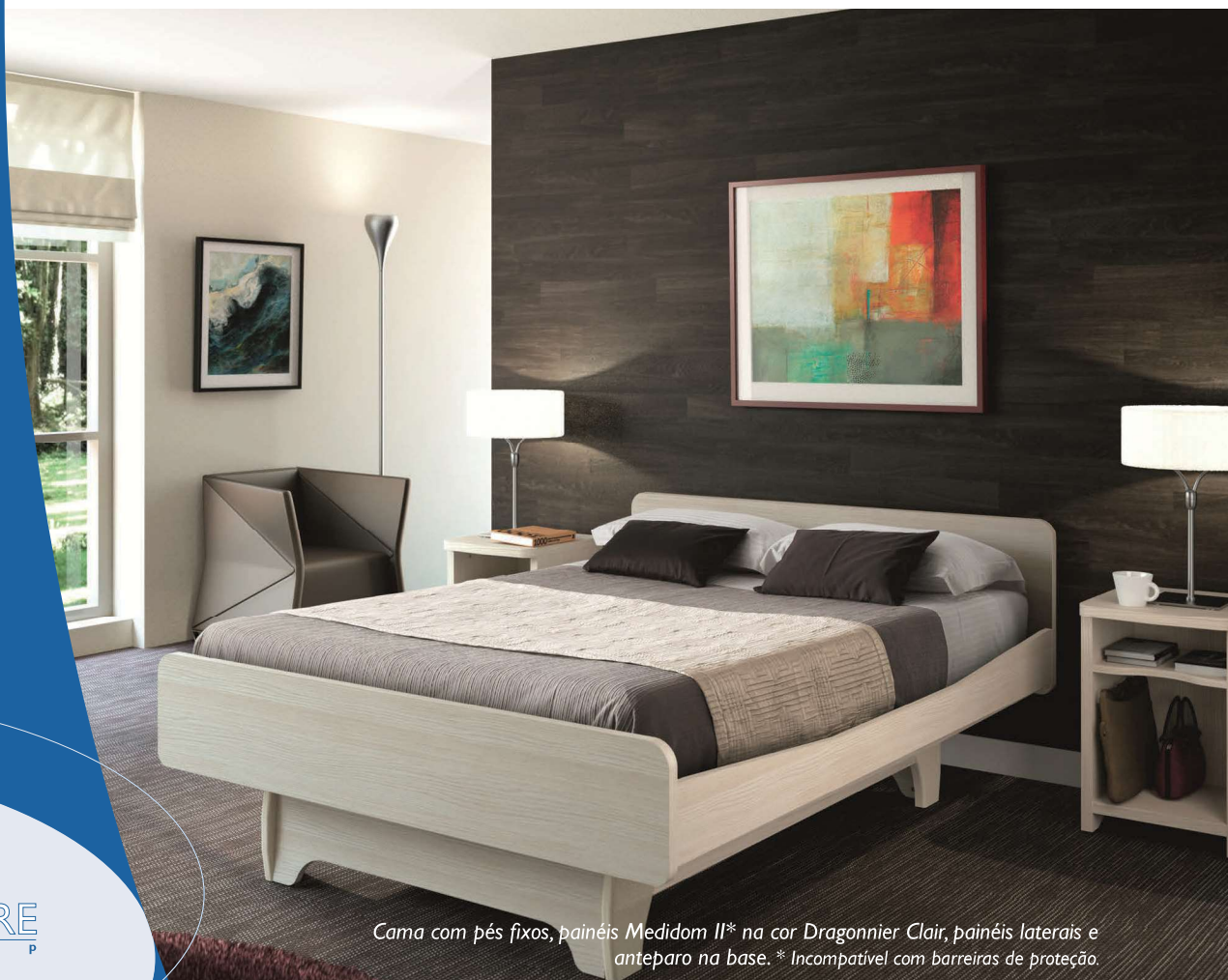

• **3 funções elétricas** com dobra para os joelhos. Sommier com duas larguras: 140 (2x70) e 160 (2x80) cm.

• **Altura variável:** de 34 a 74 cm com pés ou rodas.

• **Sommier divisível com lâminas metálicas soldadas.**

• **3 tipos de acabamento:** com rodas, com anteparo na base em madeira sobre rodas ou 4 pés fixos com anteparo na base em madeira. de 5 anos.

• **Estética:** uma vasta seleção de painéis com ou sem corrimão.


• **Robustez:** pelos materiais de fabrico e o motor LINAK, com garantia

Largura:  
34 - 74 cm



14 cm  
Espaço livre sob a cama  
otimizado, com pés ou rodas.

Imagem de cama com opção de anteparo na base em madeira.  
RAL 7030, acabamento Medidom II\* cor Dragonnier Cinzento com longarinas.  
\* Incompatível com barreiras de proteção em madeira.

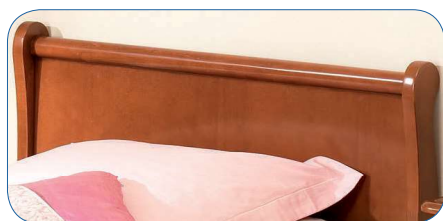

Louis-Philippe  
Design clássico e elegante



2 comandos à distância  
por infravermelhos (opcional).



Pega de apoio (disponível como acessório)



Ajuda para se deitar



Ajuda para se levantar

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	EE*	ELEVADOR DE PERNAS	CARGA NORMAL DE UTILIZACIÓN	RODAS	NORMAS	ESTANQUEIDADE
<b>DUO DIVISYS</b>							
3 funções elétricas Com dobra para os joelhos 140 cm	140 x 200 cm Sommier divisível	70°	Dobra para os joelhos 26° y 16°	315 kg Colchão 30 kg paciente 270 kg Acessórios 15 kg	Ø100 mm con travão e guarda-lanugem	CEI 60601-2-52	Motor, caixa e botoeira LINAK IP66
Ref.IDO5L24140e  160 cm Ref. IDO5L24160e	160 x 200 cm Sommier divisível		Ajuste dos pés por cremalheira				

\* EE = Elevador de encosto

- 2 suportes para acessórios (nas longarinas)
- 2 suportes do tipo haste com porta-gotejador (na cabeceira da cama)
- 2 suportes do tipo haste integrados (na cabeceira da cama)



Garantia mecânica, elétrica e da botoeira 5 anos.\*  
Garantia dos painéis e acessórios 1 ano.\*  
\*Em condições normais de utilização e exceto peças de desgaste, ver instruções de utilização.

WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winnCare.es

www.winnCare.es



Com a finalidade de promover uma melhoria contínua dos seus produtos, o GRUPO WINNCARE reserva-se o direito de alterar, sem aviso prévio, as características técnicas - fotografias com caráter não contratual.