

NUEVO

WIN  CARE

KALIN®

CAMA ARTICULADA INFANTIL



La cama KALIN

- ▶ La cama KALIN es una cama nueva que se adapta a niños y adultos que presentan una anatomía atípica con una estatura de entre 125 y 145 cm.
- ▶ Esta cama cumple con los requisitos específicos de seguridad básica y con las prestaciones esenciales para las camas articuladas infantiles según la norma NF EN 50637: 2017

Cama articulada KALIN (PO3)

Para pacientes con pérdida de autonomía motora Puede ser transitoria o permanente

KALIN®



SEGURIDAD

- ▶ Asa específica del triángulo incorporador



ERGONOMÍA

- ▶ Elevador de piernas eléctrico con flexión de rodillas
- ▶ Prevención de escaras, comodidad del paciente.



SEGURIDAD Y AUTONOMÍA

- ▶ Mando a distancia con función de bloqueo



SEGURIDAD

- ▶ Caja de seguridad para el mando a distancia



ERGONOMÍA

- ▶ Altura variable de 30 a 76 cm



CE

MOTORIZACIÓN

LINAK®
WE IMPROVE YOUR LIFE


SEGURIDAD

- ▶ Barandillas de madera de serie



SEGURIDAD

- ▶ Tope de pared

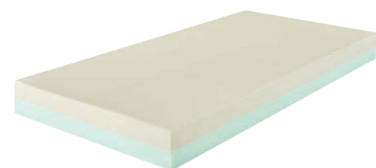

Gama de colchones adaptados:
Colchón estándar o colchón ALOVA para la prevención de escaras



¿QUÉ DICE LA NORMA EN 50637? PRINCIPALES CAMBIOS:

- ▶ Los morfotipos humanos han evolucionado y, por tanto, también los de los niños: somos más altos que nuestros antepasados.
- ▶ Esto significa que las diferentes secciones de la cama deben adaptarse a esta nueva estatura. Por ello, nuestra cama Kalin® se adapta a niños con una estatura entre 125 y 145 cm y con un peso de hasta 70 kg. por tanto, se ha reconfigurado la separación entre los espacios de la cama para evitar que el paciente quede atrapado.
- ▶ La norma NF EN ISO 60601-2-52 considera necesario proteger 3 partes del cuerpo para evitar el riesgo de que el paciente quede atrapado en la estructura de la cama o en sus accesorios, ya que esto podría causarle un traumatismo grave o incluso la muerte.
- ▶ La separación en la siguiente:
 - inferior a 6 cm, para el diámetro del cuello
 - inferior a 12 cm, para el diámetro de la cabeza
 - superior a 31,8 cm, para la anchura del tórax
- ▶ Se han reconfigurado las siguientes separaciones para las camas infantiles:
 - inferior a 4 cm, para el diámetro del cuello
 - inferior a 6 cm, para el diámetro de la cabeza
 - superior a 30 cm, para la anchura del tórax

La norma también ha considerado las peores situaciones, como la estrangulación con el cable del mando a distancia la o correa del triángulo incorporador.

Por esa razón, el asa del triángulo incorporador es diferente, el mando a distancia se encuentra en una caja con cerradura, y las separaciones de la cama y las barandillas se han reducido para cumplir con los nuevos datos de referencia sobre el riesgo de atrapamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso máximo del paciente	70 kg
Carga de funcionamiento segura	115 kg = 70 kg (paciente) + 15 kg (colchón) + 30 kg (accesorios)
Estatura del paciente	De 125 cm a 145 cm
Tamaño del somier	170 cm X 80 cm
Amplitud HV	30 a 76 cm
Motorización	Linak
Peso de la cama (sin paneles)	70 Kg
Color de la cama	RAL 7030 estructura de la cama y barandillas, paneles de roble Lindberg
Equipamiento de serie	Sommier no divisible / Elevación eléctrica del respaldo / barandillas de madera / triángulo / tope de pared.

OPCIONES Y ACCESORIOS

Elevador de piernas eléctrico con flexión de rodillas

Freno centralizado

Elevación del respaldo para RCP

Faldón (freno independiente)

Nuestra cama KALIN está disponible en 2 tipos de colchón:

- ▶ Colchón de espuma estándar ref: VMS82-CIC
- ▶ Colchón de espuma viscoelástica ref : VMA82-CIC



Mecánica, eléctrica y con mando a distancia



Paneles y accesorios



WINCARE

Departamento
comercial
+ 33 (0) 2 51 98 55 64
www.winncare.fr

Fabricante
WINNCARE FRANCE
4, Le pas du Château 85670
Saint Paul Mont Penit

Producto sanitario de clase I según el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (PS)

Este documento está dirigido a los proveedores de servicios y distribuidores de productos sanitarios y a los profesionales de la salud.