


ŁÓŻKO PITCHOUNE KALIN®



Łóżko z paneli PITCHOUNE KALIN w kolorze biało-zielonym, z okładziną drewnianą i barierkami na całej długości

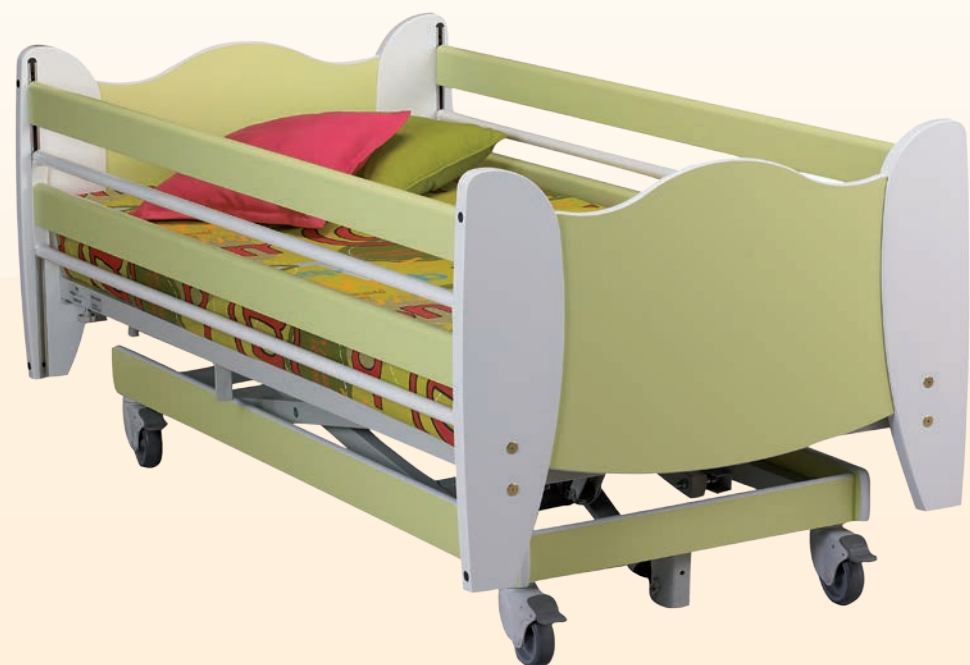

ŁÓŻKO DZIECIĘCE

FUNKCJE

- ▶ Podstawa niedzielona 160 x 80 cm
- ▶ Powierzchnia łóżka z metalowych lister spawanych
- ▶ Złącze ekwipotencjalne
- ▶ 3 funkcje elektryczne
- ▶ Amplituda od 300 do 770 mm
- ▶ Elektryczny układ podnoszenia klatki piersiowej
- ▶ Elektryczny układ podnoszenia nóg ze
- ▶ Na 4 kołach Ø 100 mm z niezależnym układem hamowania
- ▶ Opcjonalny centralny układ hamowania

MAKSYMALNY POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

- ▶ Odstęp pomiędzy listwami lub dwoma elementami konstrukcyjnymi nie przekracza 65 mm, natomiast odstęp pomiędzy podstawą, a dolną krawędzią barierki nie przekracza 65 mm
- ▶ Łóżko zalecana dla dzieci, których wzrost nie przekracza 146 cm
- ▶ Pilot jako wyposażenie seryjne, z możliwością zablokowania
- ▶ Opcjonalny układ podnoszenia klatki piersiowej CPR

ERGONOMIA

- ▶ Ułatwienie podnoszenia oraz przenoszenia pomiędzy łóżkiem a fotelem, dzięki możliwości ustawienia podstawy w pozycji płaskiej na wysokości 300 mm


ESTETYKA

2 wykończenia paneli PITCHOUNE KALIN

- ▶ Model z słupkami malowanymi w kolorze białym, umożliwiającymi założenie barierki drewnianej na całej długości
- ▶ Model przeznaczony do placówek zbiorowego zakwaterowania, z barierkami z materiału epoksydowego, z pokrowcem zabezpieczającym dla zapewnienia większego bezpieczeństwa



Przeznaczone do placówek zbiorowego zakwaterowania łóżko wykonane z paneli Pitchoune Kalin w kolorze biało-zielonym, z centralnym układem hamowania, barierki z materiału epoksydowego, z pokrowcem zabezpieczającym i słupkiem z materiału epoksydowego

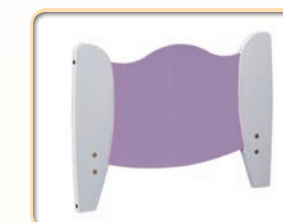

Panele odpowiednie dla dzieci: biało-zielone lub biało-fioletowe



Materac PEDIA Confort z lekko sprężystej pianki mieszanej, zabezpieczony za pomocą pokrowca CIC



Opcja: centralny układ hamowania. Wysoka dostępność i łatwość aktywacji

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

NAZWA	LPP	WYMIARY	RB	UKŁAD PODNOSZENIA NÓG	ZDOLNOŚĆ PODNOSZENIA	KOŁA	NORMY	UKŁAD NAPĘDOWY
PITCHOUNE KALIN 3 funkcje sterowania elektrycznego z układem zginania kolan	TAK	80 x 160 cm podstawa niedzielona	70°	Układ zginania kolan pod kątem 40,3° regulacja w zakresie 14,5° za pomocą zębatek	CFS ⁽¹⁾ 170 kg Materac 20 kg Pacjent 135 kg Akcesoria 15 kg	Ø100 mm z hamulcami bez osłony gwintowanej	CEI 60601-2-52	LINAK IP 54
Akcesoria	NIE	Barierki składane z materiału epoksydowego z pokrowcem zabezpieczającym						
	NIE	Panele przeznaczone do wykorzystywania w placówkach zbiorowego zakwaterowania PITCHOUNE KALIN						
	TAK	Barierki na całej długości, z drewna i materiału epoksydowego						
	TAK	Panele PITCHOUNE KALIN (z otworami przeznaczonymi na barierki na całej długości)						
	TAK	Materac Alova PEDIA Confort 160 x 80 x 14 cm dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat i od 6 do 12 lat						
	TAK	Materac z poszwą HR (w zestawie z materacem Pitchoune)						

Opcja podnoszenia klatki piersiowej CPR obowiązkowa

⁽¹⁾ Obciążenie robocze bezpieczeństwa

Gwarancja 5-letnia dotycząca elementów mechanicznych, elektrycznych i pilota*

Gwarancja 1-letnia na panele i akcesoria*

*W normalnych warunkach użytkowania, za wyjątkiem części zużywalnych patrz instrukcja użytkowania

Zajęcia nie mają wiążącego znaczenia umownego

ŁÓŻKO DOSTOSOWANE

- ▶ ŁÓŻKO DOSTOSOWANE DO KSZTAŁTÓW CIAŁA DZIECI W WIEKU OD 3 DO 12 LAT,
- ▶ Zgodność z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa, określonymi przez agencję AFSSaPS* (Francja) z dnia 26 kwietnia 2010 r.

BEZPIECZEŃSTWO

- ▶ Barierki o rozstawie nieprzekraczającym 65 mm

ERGONOMIA

- ▶ Minimalna wysokość podstawy 300 mm

* „Zalecenia z dnia 26/04/2010, przeznaczone dla użytkowników po uzyskaniu opinii specjalistów oraz Krajowej komisji ds. bezpieczeństwa sanitarnego wyrobów medycznych”

** W zależności od modeli barierek