

# COJINES CON CÉLULAS NEUMÁTICAS Y TELESCÓPICAS **KINÉRIS**



COJINES COMPUESTOS DE CÉLULAS NEUMÁTICAS REGULABLES E INDIVIDUALMENTE DEFORMABLES

- **Precisión:** ajuste exacto a la morfología del paciente gracias al manómetro\*
- **Funcionalidad:** reducción al mínimo de las presiones ejercidas sobre la piel y los tejidos gracias al principio neumático ajustable.
- **Eficacia:** limitación de las fuerzas de cizallamiento mediante la adaptabilidad y movilidad de las células.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos por el aire que circula a través de una red calibrada interconectando las células.



\* El médico debe asegurarse que el paciente o su entorno puedan hacer los ajustes del soporte. Es necesario que el médico haga las verificaciones oportunas después de 1 mes de uso.


## CARACTERÍSTICAS

- Nueva funda de poliéster/PU + elastano:
  - Transpirable
  - Elástico
  - Resistente a la abrasión
  - Resistente al moho y a la luz
  - Lavable a 90°
  - Antiamugas
  - Hipoalergénico (Oeko-Tex® Clase 2)
  - Tratamiento retardante al fuego
  - Parte inferior en tejido antideslizante
- Monocompartimento o bicompartimento para usuarios con trastorno de la estabilidad.
- Múltiples tallas disponibles en anchura y en profundidad de asiento, de 28,5 a 46,5 cm. y dos alturas: de 7 y 10 cm.
- Termoregulación por contacto con el elastano.
- Se suministra con bomba de inflado equipada con un manómetro y una guía de correspondencia de peso/talla/presión.




Manómetro

**Fire  
Retardant  
Treatment**  
EN1021-1 & 2

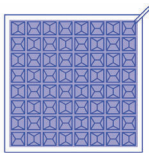

Monocompartimento para usuarios SIN trastorno de la estabilidad.  
Altura 7 cm.

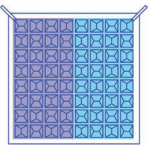

Bicompartimento para usuarios CON trastorno de la estabilidad.  
Altura 10 cm.



Reparto de presiones en un paciente de 172 cm y 75 kg



Cojín de gel de poliuretano viscoelástico



Cojín de espuma HR (Alta Resiliencia) de 6 cm



Cojín KINÉRIS monocompartimento

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	ALTURA DEL COJÍN 7 CM		ALTURA DEL COJÍN 10 CM		PESO PACIENTE Kg	DIMENSIONES AxB (cm)
	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS	1 VÁLVULA	2 VÁLVULAS		
<b>Cojín KINÉRIS Con dosfundas</b>	V367-1EL	V367-2EL	V3610-1EL	V3610-2EL	de 40 a 55	28,5 x 28,5
	V427-1EL	V427-2EL	V4210-1EL	V4210-2EL	de 40 a 45	28,5 x 33
	V497-1EL	V497-2EL	V4910-1EL	V4910-2EL	de 50 a 60	33 x 33
	V567-1EL	V567-2EL	V5610-1EL	V5610-2EL	de 40 a 65	33 x 37,5
	V667-1EL	--	V6610-1EL	--	de 50 a 75	36 x 36
	V647-1EL	V647-2EL	V6410-1EL	V6410-2EL	de 50 a 75	37,5 x 37,5
	V727-1EL	V727-2EL	V7210-1EL	V7210-2EL	de 50 a 85	37,5 x 42
	V817-1EL	V817-2EL	V8110-1EL	V8110-2EL	de 55 a 90	42 x 42
	V907-1EL	V907-2EL	V9010-1EL	V9010-2EL	de 85 a 120*	42 x 46,5
	V677-1EL	--	V6710-1EL	--	de 55 a 90	43 x 36
	V777-1EL	--	V7710-1EL	--	de 80 a 110	43 x 42
	V107-1EL	V107-2EL	V1010-1EL	V1010-2EL	de 110 a 120*	46,5 x 46,5

\* Compatibilidad bajo responsabilidad médica para pacientes pesando hasta 150Kg.

3 años de garantía. En colectividades la garantía de la funda es de 1 año.

Mantenimiento de la funda:



**WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España**  
Tel : +34 9 61 56 55 21 – Fax : +34 9 61 56 03 83 – E-mail : ventas@winncare.es

[www.winncare.es](http://www.winncare.es)



Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.